

全自动液体操作解决方案

Automatic Liquid Handling Solution

为您提供定制化专业解决方案
携手探索无限可能

欢迎联系我们，获取产品选型与应用方案。



关注公众号



关注抖音



关注Bilibili

上海昨非实验室设备有限公司

地址：上海市闵行区春东路555号

电话：15800616566

网址：www.zuofeibio.com

上海昨非实验室设备有限公司
Shanghai Zuofei-laboratory Equipment Co., LTD

The logo for ZUOFEI, with 'ZUO' in blue and 'FEI' in green, separated by a thin blue horizontal line.

ZUOFEI

在不断探索的科研世界里
反躬自省，简单真实
让科学仪器自动化
让科学仪器智能化
坚持以自主研发为核心
打造高端生产力
满足多样的定制化需求
助力科研行业革新升级

In the ever-evolving world of scientific research
Reflect inward, stay simple and true
Make scientific instruments automated
Make scientific instruments intelligent
Stay committed to independent R&D
Build advanced productive capabilities
Meet diverse customization needs
Drive innovation and advancement in scientific research

上海昨非实验室设备有限公司
Shanghai Zuofei-laboratory Equipment Co., LTD

Contents

上海昨非实验室设备有限公司

Shanghai Zuofei-laboratory Equipment Co., LTD

全自动液体操作解决方案

Automatic Liquid Handling Solution

2026

目录

关于我们
ABOUT US

P03-P09

企业概况
Company Profile

P.03

发展历程
Development History

P.05

荣誉资质
Honors and Qualifications

P.07

产品与服务
PRODUCT AND SERCVICE

P9-P22

产品系列
Company Profile

P.9

服务标准
Service Standards

P.22

合作
COOPERATIVE


P23

合作伙伴
Cooperative Partner

P.23

Company Profile

企业概况

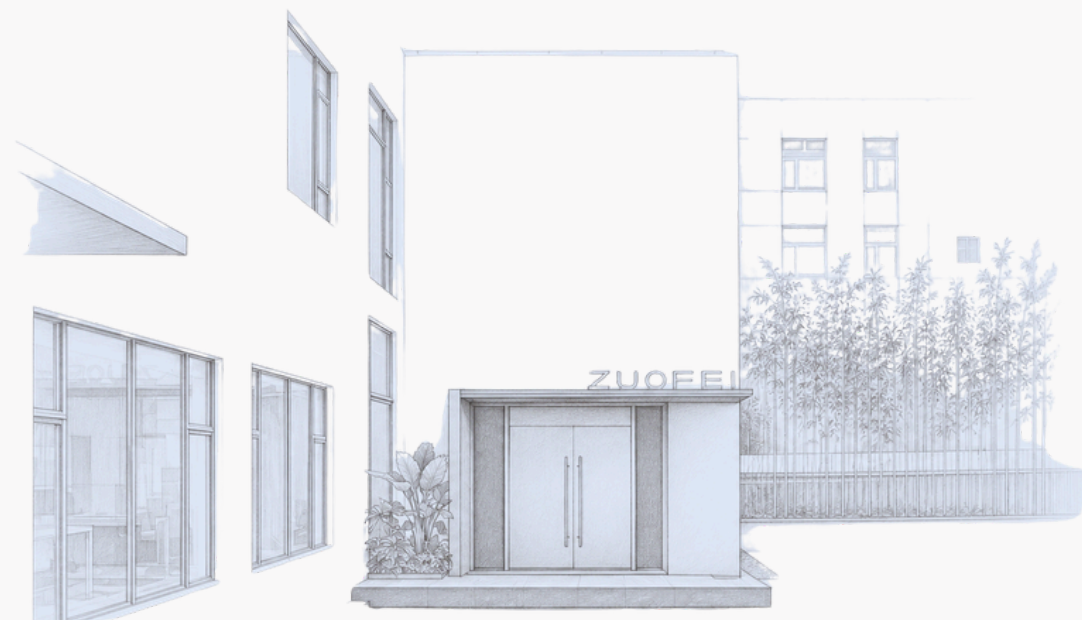

Automatic Liquid Handling Solution

全自动液体操作解决方案

17 年
成立时间


9 款
自研产品

24 项
专利数量

20 +
涵盖行业

上海昨非实验室设备有限公司（简称“上海昨非”），成立于2009年，经过十多年的稳健发展，已经成长作为一家专注于为生物医药、医学研究、生命科学研究等机构提供先进设备及耗材的高新技术企业。


公司秉持“反躬自省，简单真实”的文化理念和“让科学仪器自动化、智能化”的愿景使命，坚持以自主研发为核心的高端生产力，满足客户多样的定制化需求，助力科研行业的革新升级。

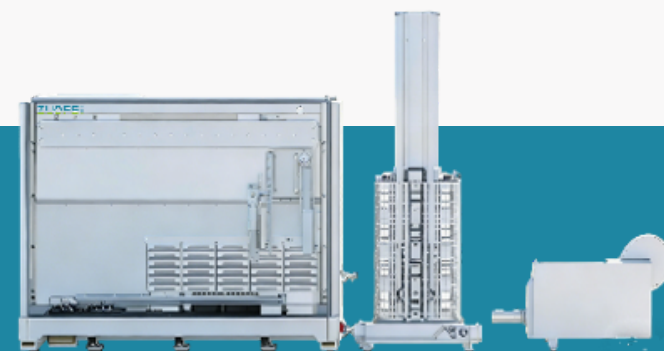

上海昨非实验室设备有限公司
Shanghai Zuofei-laboratory Equipment Co., LTD

Development History

发展历程

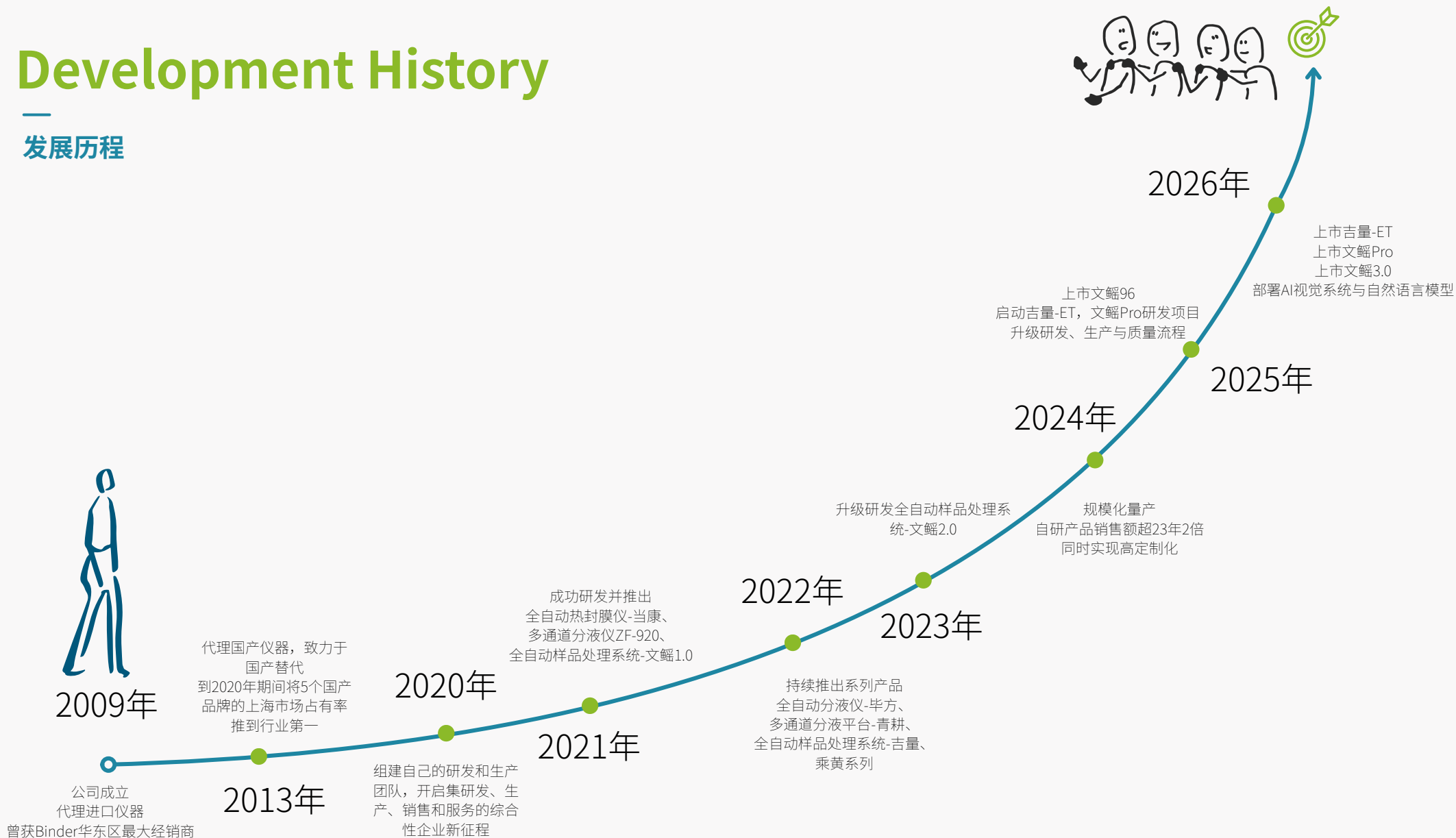

Corporate Qualification

企业资质

以专业能力与持续创新，构建企业发展的长期基础

01



上海市高新技术企业

HIGH-TECH ENTERPRISE

技术创新

研发体系

成果转化

02



上海市专精特新企业

SPECIALIZED & INNOVATIVE ENTERPEISE

专业化

精细化

特色化

创新化

Intellectual Property

知识产权实力

34

项

专利及软件著作权

研发成果覆盖液体处理、样品处理、
分液、封膜及软件控制等关键环节

02

发明专利

INVENTION

16

实用新型

UTILITY MODEL

16

软件著作权

SOFTWARE

代表性成果

01 — 移液工作站

发明专利

02 — 一种样品自动处理装置

发明专利

03 — 压力仓及移液工作站

实用新型

04 — 移液器退枪装置及移液工作站

实用新型

05 — 文鳐全自动样品处理系统

软件著作权

06 — 吉量全自动样品处理系统

软件著作权

07 — 多通道分液平台-ZF920软件

软件著作权

08 — 多通道分液平台-青耕软件

软件著作权

Product Range

产品系列

01 文鳐 全自动样品处理系统

高精度移液器选择:

- 单通道
- 4/6/8/12道可变间距移液器
- 4/8/24/96道固定间距移液器
- 独立8通道可变间距移液器
- 移液范围0.5 μ L-1250 μ L
- 单通道最高可达5000 μ L

安全配置:


- 紫外灭菌灯
- HEPA高效过滤器

适配耗材:

- SBS规格耗材
- 各种规格离心管、冻存管、采血管、试剂瓶等;
- 可定制各类耗材适配器

板位数:

- 可选12/20板位
- 废枪头盒不占板位
- 可选配控温/振荡/磁力架/
- 正压/负压/离心等模块

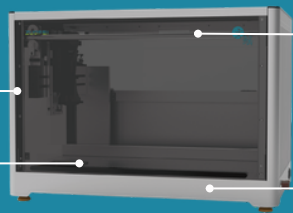

即用化的程序，无需编程

自主研发与可定制服务，常用类型无需编程，简单的点击式操作即可完成方法编辑，新手也能轻松操作



向导式操作

按软件提示逐步放置实验室耗材，提升准确性，减少出错率



智能化设计

自动探测吸头与耗材，支持液面探测与液面跟随



分级权限

可设定不同级别的操作权限

应用解决方案

覆盖板间移液、PCR/qPCR体系构建、梯度稀释、细胞培养、药物筛选及ELISA等高通量样本处理场景

基因组学/分子生物学



新药发现




细胞生物学




临床应用



适配器类型

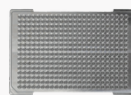

384孔PCR板适配器

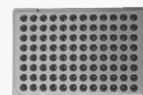

96孔PCR板适配器



1.5/2.0mL离心管适配器



1.5/2.0mL离心管/可立管适配器



1.5/2.0mL离心管适配器载架



4板位SBS板载架



倾斜载架

模块类型



加热振荡模块

最大载量: 1.0KG
振荡频率: 200-3000rpm
振荡幅度: 2mm 65dB
控温范围: 室温至125°C
温度准确性: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
温度均匀性: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}@45^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.8^{\circ}\text{C}@75^{\circ}\text{C}$, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}@95^{\circ}\text{C}$



制冷模块

环境温度: 10-30°C
控温标准: 4-70°C
温度准确性: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($>15^{\circ}\text{C}$ ~ $\leq 70^{\circ}\text{C}$), $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\geq 4^{\circ}\text{C}$ ~ $\leq 15^{\circ}\text{C}$)
温控精度: 0.1°C



自动化PCR仪

适用耗材: 标准PCR专用微孔全裙板
温度准确度: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$
控温精度: $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
温度均匀性: $\leq 0.3^{\circ}\text{C}@55^{\circ}\text{C}$
控温技术: 3区域半导体制冷器控温



高效过滤器

风扇寿命: 适度使用3年
过滤器寿命: 适度使用2年
风速: 0.2-0.5m/s
过滤效率 $\geq 99.99\% @ 0.3\mu\text{m}$
噪音水平: $\leq 58\text{dB}$ (A)



磁力架

可根据耗材进行定制化设计
适配耗材:
96孔PCR板、96深孔板、5/15/50mL离心管等

移液器快速选型

01

可变/固定间距移液器
(进口)

✓ 适合多规格板间移液

4/6/8/12/16通道

0.5-12.5μL

2-50μL

5-125μL

10-300μL

50-1250μL

02

固定间距移液器

✓ 适合标准版批量移液

8通道/96通道

3-300μL

5-1000μL

1-50μL

2-200μL

03

单道移液器

✓ 适合灵活移液及大体积操作

单通道

1-1000μL

100-5000μL

液面检测

04

独立通道可变间距移液器

✓ 适合不同容器之间的转移

8通道

1-1000μL

独立控制

液面检测

准确性与精密度测试数据详见技术参数附录

产品参数

名称	全自动样品处理系统
型号	文鳐
板位数	12/20个, 废枪头盒不占板位数
移液器	4/8/24/96道固定间距移液器, 4/6/8/12道可变间距移液器, 独立8通道可变间距移液器
适用耗材	开放性耗材, 6/12/24/48/96/384孔板/离心管/冻存管/可立管/采血管
适用吸头	自动化吸头
移液范围	0.5μL-1250μL (单通道可达5000μL)
工作环境	环境温度5-40°C和相对湿度20%-80%
电源功率	150W
外形尺寸	730×634×756 (mm) / 1005×634×756 (mm)
净重	60~80kg

02 乘黄-ZE 全自动样品处理系统



功能升级

适应性升级

安全性升级

软件升级

降噪升级

应用场景

样本转移、连续分液、梯度稀释

96/384孔板的整版自动化移液

一吸一喷、一吸多喷、吹打混匀

细胞培养、活性测定、PCR体系构建、组学

产品参数

指标	型号参数								
规格	CH-ZE50			CH-ZE200			CH-ZE1000		
通道数	96								
板位数	4 (可定制2/3/5/6板位)								
移液头材质	全金属免维护移液喷头，高试剂兼容性，无需定期更换密封圈								
移液技术	空气置换								
兼容耗材	96/384孔板、PCR板、酶标板等								
适用吸头	自动化吸头								
安全与控制	急停开关，安全光栅，状态指示灯，Pad在位与近端控制								
移液范围	1-50μL			2-200μL			5-1000μL		
测试体积	1μL	5μL	50μL	2μL	50μL	200μL	5μL	100μL	500μL
移液准确度(±%)	10	5	1	5	1	0.5	5	1	0.5
移液精确度(≤%)	5	2	1	6	2	0.5	5	1.5	1
工作环境	环境温度5-40°C和相对湿度20%-80%								
电源	AC100-240V,50/60Hz								
静态尺寸 (W x D x H)	580×336×523 (mm)						580×336×600 (mm)		
净重	33.5KG						40KG		

03 吉量 全自动样品处理系统

高精度移液器选择：

- 单通道，8通道固定间
- 4/6/8/12道可变间距移液器

移液范围：0.5μL-1250μL
单通道最高可达5000μL

适配耗材：

- 几乎适配所有SBS规格耗材
- 各种规格离心管、冻存管、采血管、试剂瓶等
- 可定制各类耗材适配器

- 配备4个板位，废枪头盒不占板位数
- 支持板位横/竖放
- 可根据实验需求任意布局

产品特点

应用全覆盖
孔板、EP管、离心管、试管、西林瓶等

电动调距
枪头间距4.5-33mm

效率提升
移液速度提升8-12倍


应用场景

样本转移、连续分液、梯度稀释


细胞培养、PCR体系构建、基因组学和蛋白质组学

一吸一喷、一吸多喷、吹打混匀


适配器类型

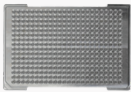

384孔PCR板适配器

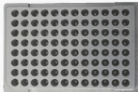

96孔PCR板适配器

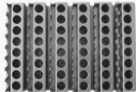

1.5/2.0mL离心管适配器



1.5/2.0mL离心管/可立管
适配器



倾斜载架

产品参数

型号	吉量	
规格	JL-IN-5	JL-IN-5-1250
板位数	4个，废枪头盒不占板位数	
移液器	单通道，8通道固定间距，6、8、12通道高精度可变间距移液器	
适用耗材	24/48/96/384孔板，高度低于61mm的管类耗材	24/48/96/384孔板，高度低于103mm的管类耗材
适用吸头	自动化吸头	
移液范围	0.5μL-300μL	0.5μL-1250μL(单通道可达5000μL)
工作环境	环境温度5-40℃和相对湿度20%-80%	
电源功率	AC100-240V,50/60HZ	
外形尺寸 (W x D x H)	777×360×515(mm)	777×360×600(mm)
净重	38KG	

04 吉量-ZT 全自动样品处理系统

紧凑型设计与智能控制

- 可整机嵌入超净工作台或生物安全柜
- 配置显示屏，支持远程控制

高应用覆盖

- 单通道~8通道模式下，具备12个SBS标准板位含1个储液槽板位，单独1个废枪头盒板位
- 可选配加热振荡模块与加热制冷模块

高精度移液器选择：

- 单通道，8通道固定间距
- 4/6/8/12道可变间距移液器
- 移液范围：0.5μL-1250μL
- 单通道最高可达5000μL

适配耗材：

- 几乎适配所有SBS规格耗材
- 各种规格离心管、冻存管、采血管、试剂瓶等
- 可定制各类耗材适配器

产品特点



高应用全覆盖
制药、高校科研等液体操作



审计与权限
审计追踪、权限控制、符合GMP



合规确认
提供IQ、OQ确认

应用场景



自动化液体操作
高覆盖、高精度移液




制药实验室
符合GMP规范




高校科研
支持多种实验流程


适配器类型

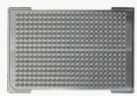

384孔PCR板适配器

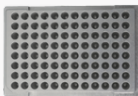


96孔PCR板适配器

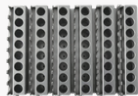

1.5/2.0mL离心管适配器



1.5/2.0mL离心管/可立管
适配器

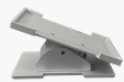

倾斜载架

产品参数

项目	参数说明
板位数	12个SBS板位包含1个储液槽板位，另配废枪头盒不占板位数
移液器	单通道移液器，8道固定间距移液器，4/6/8/12道可变间距移液器
适用耗材	开放性耗材，48/96/384孔板/离心管/冻存管/可立管 可搭配6个10mL离心管架，每个容纳36根离心管，一共容纳216根离心管
适用吸头	自动化吸头
移液范围	0.5μL-1250μL（单通道可达5000μL）
模块	可选配加热振荡和加热制冷模块
控制	Pad触摸屏，软硬件分离，支持远程控制与软件升级
工作环境	环境温度5-40℃和相对湿度20%-80%
电源功率	150W
尺寸（W×D×H）	800×435×620（mm），可嵌入超净工作台或生物安全柜内
净重	43Kg

准确性与精密度测试数据详见技术参数附录

05 青耕 多通道分液平台

配备高精度蠕动泵，最高可12通道分液，支持多种规格蠕动管


直观的用户界面可轻松进行程序设置



兼容所有SBS标准版及不同口径的冻存管盒采样管；可提供定制化服务

整机结构紧凑，节约工作台面


应用场景

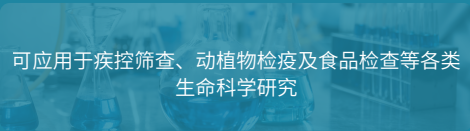


产品参数

名称	多通道分液平台
型号	青耕
分液范围	30μL~30mL
分液准确度	±1%@100μL
分液精确度	2%CV@100μL
分液速度	最大12*250μL/秒
板位配置	24/48/96/384孔等SBS标准板位，最大装板数量3块
消毒方式	化学消毒和物理消毒
工作温度	10℃~35℃
输入电压	100~240V @50~60Hz
尺寸（W×D×H）	490×400×370（mm）
净重	25KG

06 青耕-8 多通道分液平台

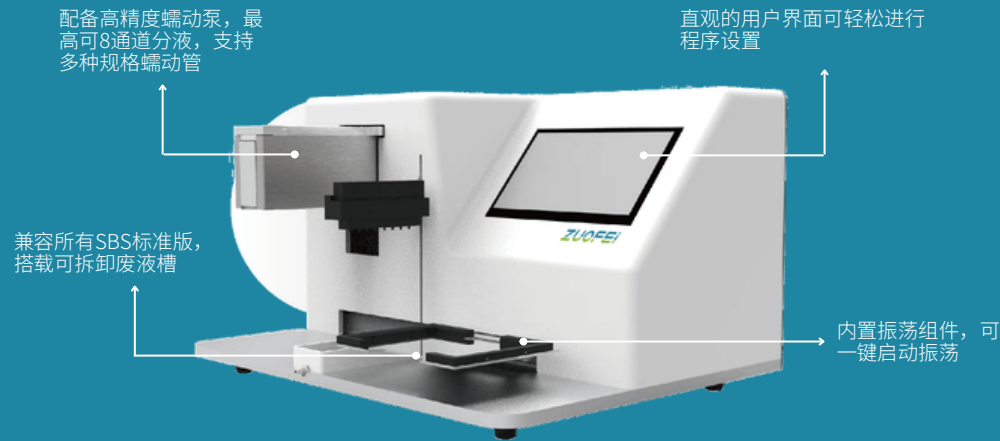


应用场景

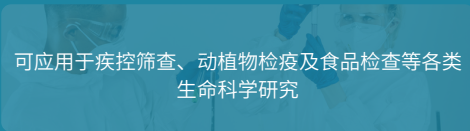


产品参数

名称	多通道分液平台
型号	青耕-8
分液范围	5μL~9999μL(1μL增量)
分液准确度	5μL±3%,10μL±2%,100μL±1%
分液精确度	5μL≤3%,10μL≤2%,100μL≤1%
分液速度	三档可选，可自定义分液速度
板位配置	支持6/12/24/48/96/384孔等SBS标准板位，可定制不同规格实验用耗材适配器
消毒方式	化学消毒和物理消毒
工作温度	5℃~35℃
输入电压	100~240V @50~60Hz
尺寸(W×D×H)	429×330×257(mm)
净重	13.3KG

07 毕方 全自动分液仪

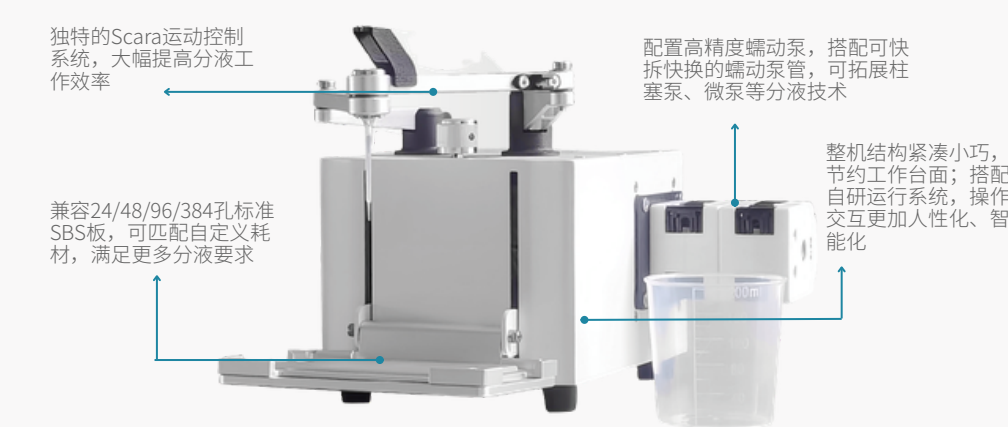

应用场景

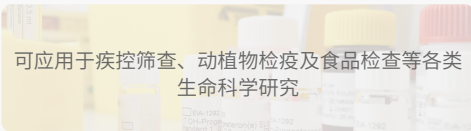

产品参数

名称	全自动分液仪
型号	毕方
分液范围	10μL~9999μL
分液准确度	±1%@100μL
分液精确度	2%CV@100μL
板位配置	适配一块标准SBS板位，可自定义耗材
消毒方式	化学消毒和物理消毒
工作温度	5℃~35℃
输入电压	100~240V @50~60Hz
尺寸(W×D×H)	290×245×300(mm)
净重	4KG

08 当康 全自动封膜仪



08 当康X 全自动封膜仪



产品参数

名称	全自动封膜仪	
型号	当康	当康X
封膜时间	8s左右(机器时间2.5s)	0-10s
预热时间	10分钟	15s
封膜温度	30-200℃	120-200℃
兼容性	7-64mm高度各式孔板	3-60mm高度各式孔板(42mm高度以下孔板需适配器)
尺寸(W×D×H)	230×220×290(mm)	220×320×610(mm)
净重	10KG	25KG
工作环境	4-40℃、10%-90%相对湿度、无冷凝	
输入电压	220V	

专业支持，服务全程

从需求沟通、方案实施到售后保障，提供一站式自动化服务支持

01 售前咨询

- ☑ 技术交流
- ☑ 需求方案
- ☑ 现场DEMO

02 交付实施

- ☑ 标准化流程
- ☑ 送货安装
- ☑ 技术培训

03 售后保障

- ☑ 服务承诺
- ☑ 快速响应
- ☑ 维修保障

04 长期协同

- ☑ 经验沉淀
- ☑ 定制软件
- ☑ 持续优化



响应及时，服务到位，全自动化流程一站式实现



技术交流



现场Demo



安装培训

合作伙伴

药企



CRO/CDMO



抗体/试剂



政府



科研



第三方检测



化妆品



01 文螯移液器类型

类型	量程	通道	移液体积	移液准确度 (±%)	移液精密密度 (≤%)
可变/固定间距移液器 (进口)	0.5μL-12.5μL	8通道：可变间距4.5-14mm	1.25	10	6
		12通道：可变间距4.5-9mm	6.25	4	1.6
		8/12通道：固定间距9mm	12.5	2	0.8
		16通道：固定间距4.5mm			
	2μL-50μL	8通道：可变间距4.5-14mm	5	5	2.5
		12通道：可变间距4.5-9mm	25	2.5	0.6
		8/12通道：固定间距9mm	50	1.5	0.4
		16通道：固定间距4.5mm			
	5μL-125μL	8通道：可变间距4.5-14mm	12.5	3.75	1.5
		12通道：可变间距4.5-9mm	62.5	2.5	0.7
		8/12通道：固定间距9mm	125	1.6	0.35
		16通道：固定间距4.5mm			
	10μL-300μL	4通道：可变间距9-33mm	30	4	1.2
		6通道：可变间距9-19.8mm	150	2	0.6
		8通道：可变间距9-14mm	300	1.6	0.35
		8/12通道：固定间距9mm			
	50μL-1250μL	4通道：可变间距9-33mm	125	6	1.1
		6通道：可变间距9-19.8mm	625	2.4	0.5
		8通道：固定间距9-14mm	1250	1.2	0.3
		8/12通道：固定间距9mm			
固定间距移液器	3μL-300μL	8通道	3	8	8
			10	5	4
			300	2	0.75
			5	5	5
	5μL-1000μL	8通道	100	2	1
			1000	1	0.75
			1	5	8
			10	2	3
	2μL-200μL	96通道	2	5	6
			50	1	2
			5	5	5
			100	0.5	1.5
单道移液器	1μL-1000μL (液面检测)	单通道	500	0.3	1
			1	5	8
			5	5	2
			50	2	0.75
			1000	1	0.75
			10	10	10
			200	4	4
			1000	3	3
	100μL-5000μL (液面检测)	单通道	5000	1	1
			1	5	8
			5	5	2
			50	2	0.75
独立通道可变间距移液器	1μL-1000μL (液面检测)	8通道	1	5	8

02 吉量-ET移液器类型

类型	量程	通道	移液体积	移液准确度 (±%)	移液精密密度 (≤%)
可变/固定间距移液器 (进口)	0.5μL-12.5μL	8通道：可变间距4.5-14mm	1.25	10	6
		12通道：可变间距4.5-9mm	6.25	4	1.6
		8/12通道：固定间距9mm	12.5	2	0.8
		16通道：固定间距4.5mm			
	2μL-50μL	8通道：可变间距4.5-14mm	5	5	2.5
		12通道：可变间距4.5-9mm	25	2.5	0.6
		8/12通道：固定间距9mm	50	1.5	0.4
		16通道：固定间距4.5mm			
	5μL-125μL	8通道：可变间距4.5-14mm	12.5	3.75	1.5
		12通道：可变间距4.5-9mm	62.5	2.5	0.7
		8/12通道：固定间距9mm	125	1.6	0.35
		16通道：固定间距4.5mm			
	10μL-300μL	4通道：可变间距9-33mm	30	4	1.2
		6通道：可变间距9-19.8mm	150	2	0.6
		8通道：固定间距9-14mm	300	1.6	0.35
		8/12通道：固定间距9mm			
	50μL-1250μL	4通道：可变间距9-33mm	125	6	1.1
		6通道：可变间距9-19.8mm	625	2.4	0.5
		8通道：固定间距9-14mm	1250	1.2	0.3
		8/12通道：固定间距9mm			
固定间距移液器	3μL-300μL	8通道	3	8	8
			10	5	4
			300	2	0.75
			5	5	5
	5μL-1000μL	8通道	100	2	1
			1000	1	0.75
			1	5	8
			5	5	2
	1μL-1000μL (液面检测)	单通道	50	2	0.75
			1000	1	0.75
			10	10	10
			200	4	4
	100μL-5000μL (液面检测)	单通道	1000	3	3
			5000	1	1
			1	5	8
			5	5	2